

Mã: H42A; H42B; H42C

- Tên sản phẩm: Khay thử dạng nhúng xét nghiệm định tính phân biệt THC/MET/MOR/MDMA/KET
- Chủng loại: dfu EASY TEST DOA 5-1
- Đóng gói: 15 xét nghiệm / hộp; 20 xét nghiệm / hộp; 25 xét nghiệm / hộp
- Số lưu hành: 250000569/PCBB-HCM

THÀNH PHẦN BỘ XÉT NGHIỆM

Thành phần 1 hộp	Mã sản phẩm / Quy cách đóng gói		
	H42A 15 xét nghiệm/ hộp	H42B 20 xét nghiệm/ hộp	H42C 25 xét nghiệm/ hộp
Khay thử trong túi nhôm với túi hút ẩm (cái)	15	20	25
Cốc nhựa (cái)	15	20	25
Hướng dẫn sử dụng (tờ)	1	1	1

NGƯỠNG PHÁT HIỆN

Chất	Nồng độ (ng/mL)
11-nor- Δ^9 -THC-9 COOH (THC)	50
Methamphetamine (MET)	500
Morphine (MOR)	300
Methylenedioxymethamphetamine (MDMA)	500
Ketamine (KET)	1000

Test thử ma túy 5 chỉ số – Giải pháp nhanh chóng và hiệu quả để xác định tình trạng sử dụng ma túy trong cơ thể.

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F

Tầng 5, Nhà xưởng số 02, Lô I-3b-1, Đường N6, Khu Công nghệ cao TP.HCM, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(+84) 28 71098734

www.dfuf.com.vn



dfu

Diagnosis F co.,Ltd.

THC/MET/MOR/MDMA/KET




GIỚI THIỆU:

Tệ nạn nghiện ma túy đang diễn ra ngày càng phổ biến và đáng báo động. Bình thường khó có thể nhận diện được một người bị nghiện ma túy trừ khi họ đang lên cơn nghiện. Tuy nhiên, xét nghiệm THC/MET/MOR/MDMA/KET trong nước tiểu là hình thức xét nghiệm nhanh nhất, an toàn và hiệu quả giúp nhận biết và sàng lọc đối tượng sử dụng ma túy hay các chất gây nghiện.

dfu EASY TEST DOA 5-1

Kiểm tra nhanh chóng
Kết quả chính xác

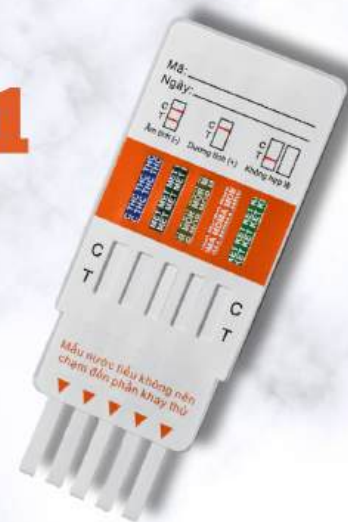



VẤN ĐỀ NÓNG BỎNG ?

HẬU QUẢ CỦA MA TÚY:

Báo động 67% tai nạn giao thông có liên quan đến ma túy.

45% doanh nghiệp gặp sự cố lao động do nhân viên sử dụng chất kích thích.

Cá nhân: Suy giảm trí nhớ, phá hủy nội tạng, tử vong do sốc thuốc.


Doanh nghiệp: Mất uy tín, giảm năng suất, rủi ro pháp lý.

Xã hội: Gánh nặng kinh tế, mất an ninh trật tự.

" dfu EASY TEST DOA 5-1 " GIẢI PHÁP TIỆN LỢI - NHANH CHÓNG

- ✓ Phát hiện sớm 5 chất gây nghiện nguy hiểm trong một lần thử.
- ✓ Tiết kiệm 80% thời gian so với xét nghiệm lab.
- ✓ Ngăn chặn rủi ro trước khi quá muộn.

SỬ DỤNG DỄ DÀNG

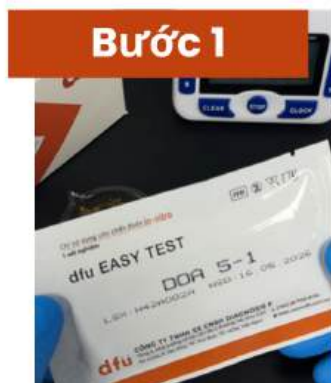

Bước 1

Để khay thử, mẫu nước tiểu và/hoặc mẫu đối chứng ở nhiệt độ phòng (15 - 30°C) trước khi xét nghiệm.




Bước 2

Lấy khay thử ra khỏi túi nhôm và sử dụng ngay lập tức.



Bước 3

Theo chiều mũi tên chỉ về phía mẫu nước tiểu, nhúng khay thử vào mẫu nước tiểu theo chiều mũi tên, giữ trong ít nhất 10 - 15 giây. Không để nước tiểu chạm đến phần khay thử.

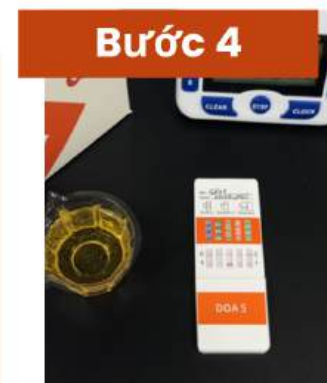

Bước 4

Đặt khay thử trên bề mặt phẳng không thấm nước, bắt đầu hẹn giờ và đợi (các) vạch màu đỏ xuất hiện.



Bước 5

Đọc kết quả sau 5 phút. Không đọc kết quả sau quá 10 phút.

dfu EASY TEST DOA 5-1



Tetrahydrocannabinol (THC)

là thành phần hoạt chất chính trong cây cần sa Marijuana. Sử dụng THC sẽ gây hậu quả nghiêm trọng như suy giảm trí nhớ, giảm khả năng tiếp thu, mất kiểm soát cơ thể, gây rối loạn hành vi.

Methamphetamine (MET)

Ma túy đá - một chất kích thích mạnh, gây nghiện cao và ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương. MET kích thích não tiết ra một lượng lớn dopamine và dopamine làm cho người sử dụng cảm thấy hưng phấn nhưng không theo những cơ chế tự nhiên của cơ thể. Điều này khiến người đó khao khát được trải nghiệm một lần nữa, dẫn đến tình trạng nghiện.

Morphine (MOR)

chất giảm đau gây nghiện (opiat) gồm một nhóm lớn các chất kiểm soát đau bằng cách ức chế hệ thần kinh trung ương. Ngoài tác dụng giảm đau nhóm này còn gây ra hậu quả rất nghiêm trọng là gây phụ thuộc vào thuốc, nếu muốn giảm đau thì phải tăng liều thuốc dễ gây nghiện và nguy hiểm.

Methylenedioxymethamphetamine (MDMA)

là thuốc lắc, một chất tương tự amphetamine có tác dụng kích thích và gây ảo giác. MDMA gây ra tình trạng phấn khích và giải ức chế và đẩy mạnh cảm giác sinh lý, sự cảm thông và cảm giác gần gũi giữa các cá nhân. Thời gian tác dụng bắt đầu từ 30 đến 60 phút và thường kéo dài từ 4 đến 6 giờ. Sử dụng lặp lại lâu dài, có thể gây ra các vấn đề tương tự như amphetamin, bao gồm phụ thuộc, một số người bị tâm thần phân liệt, sự suy giảm nhận thức.

Ketamine (KET)

là một chất gây mê được sử dụng trong y tế, nhưng bị lạm dụng như một chất gây nghiện với tác dụng gây ảo giác và tê liệt tạm thời. Tác hại của KET bao gồm suy giảm trí nhớ, tổn thương hệ thần kinh, và nguy cơ nghiện ngập. Sử dụng lâu dài có thể dẫn đến suy thận và rối loạn tâm thần.

Code: H42A; H42B; H42C

- Product name: Diagnostic Kit for differential detection of THC/MET/MOR/MDMA/KET
- Model name: dfu EASY TEST DOA 5-1
- Packaging: 15 tests / box; 20 tests / box; 25 tests / box
- **Granted circulation number: 250000569/PCBB-HCM**

COMPOSITION OF KIT

Composition of 1 kit	Product code / Packing size		
	H42A 15 tests / kit	H42B 20 tests / kit	H42C 25 tests / kit
Dip-card in aluminum pouch with desiccant (ea)	15	20	25
Plastic cup (ea)	15	20	25
Instruction for use (ea)	1	1	1

DETECTION THRESHOLD

Substance	Concentration (ng/mL)
11-nor- Δ^9 -THC-9 COOH (THC)	50
Methamphetamine (MET)	500
Morphine (MOR)	300
Methylenedioxymethamphetamine (MDMA)	500
Ketamine (KET)	1000

5-indicator drug test – A quick and effective solution to determine drug use status in the body.

DIAGNOSIS F BIOTECHNOLOGY PRODUCTION COMPANY LIMITED

5th Floor, Factory no.2, Lot I-3b-1, Street N6, Saigon Hi-tech Park, Tan Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam.

+123-456-7890

www.dfu.com.vn



dfu

Diagnosis F co.,Ltd.

THC/MET/MOR/MDMA/KET



INTRODUCTION:

Drug addiction is becoming more and more common and alarming. Normally, it is difficult to identify a drug addict unless they are in an addiction. However, the THC/MET/MOR/MDMA/KET urine test is the fastest, safest and most effective form of testing to identify and screen drug users or addictive substances.

dfu EASY TEST DOA 5-1

Check fast – Accurate results





HOT ISSUE?

EFFECTS OF DRUGS:

Alarming 67% of traffic accidents are related to drugs.

45% of businesses have labor accidents due to employees using stimulants.

Individuals: Memory loss, organ damage, death due to drug shock.

Businesses: Loss of reputation, reduced productivity, legal risks.

Society: Economic burden, loss of security and order.

" dfu EASY TEST DOA 5-1 " CONVENIENT - FAST SOLUTION

- ✓ Early detection of 5 dangerous addictive substances in one test.
- ✓ Save 80% of time compared to lab testing.
- ✓ Prevent risks before it's too late.

EASY TO USE



Step 1

Allow the test tray, urine specimen and/or control specimen to reach room temperature (15 - 30°C) prior to testing.



Step 2

Remove the test tray from the aluminum pouch and use immediately.



Step 3

Following the arrow pointing towards the urine sample, immerse the test tray into the urine sample in the direction of the arrow, holding for at least 10 - 15 seconds. Do not let the urine touch the test tray.



Step 4

Place the test strip on a flat, non-absorbent surface, start the timer and wait for the red lines to appear.



Step 5

Read results after 5 minutes. Do not read results after 10 minutes.

dfu EASY TEST DOA 5-1



Tetrahydrocannabinol (THC)

is the main active ingredient in the Marijuana plant. Using THC will cause serious consequences such as memory loss, reduced learning ability, loss of body control, and behavioral disorders.

Methamphetamine (MET)

Methamphetamine - a powerful stimulant, highly addictive and affects the central nervous system. MET stimulates the brain to secrete large amounts of dopamine and dopamine makes the user feel excited but not according to the body's natural mechanisms. This makes the person crave the experience again, leading to addiction.

Morphine (MOR)

Opiates are a large group of substances that control pain by inhibiting the central nervous system. In addition to their pain-relieving effects. This group also causes very serious consequences such as drug dependence. If you want to relieve pain, you have to increase the dose of the drug, which is addictive and dangerous.

Methylenedioxymethamphetamine (MDMA)

is ecstasy, an amphetamine-like stimulant and hallucinogen. MDMA causes euphoria and disinhibition and enhances physiological sensations, empathy, and feelings of closeness between individuals. The effects begin within 30 to 60 minutes and typically last for 4 to 6 hours. Repeated, long-term use can cause problems similar to amphetamines, including dependence, schizophrenia, and cognitive impairment in some people.

Ketamine (KET)

is a medically used anesthetic, but is abused as a narcotic with hallucinogenic and temporary paralytic effects. The side effects of KET include memory loss, nervous system damage, and the risk of addiction. Long-term use can lead to kidney failure and mental disorders.